



GamCath留置导管：多种选择，助力高效血液净化

建立有效的血管通路是高效血液净化的开端，选择合适的导管能够促进治疗达成并简化工作流程。百特深耕急性血液净化领域，设计并制造灵活创新的GAMCATH导管全系列产品，致力于帮助临床实现更加优化的治疗。


百特GAMCATH系列导管适用于在体外血液净化治疗中建立短期血管通路。

GAMCATH留置导管系列产品


- GAMCATH常规导管
- GAMCATH高流量导管
- GAMCATH海豚涂层高流量导管

GAMCATH常规导管 双腔、三腔和儿科专用留置导管


GAMCATH双腔留置导管

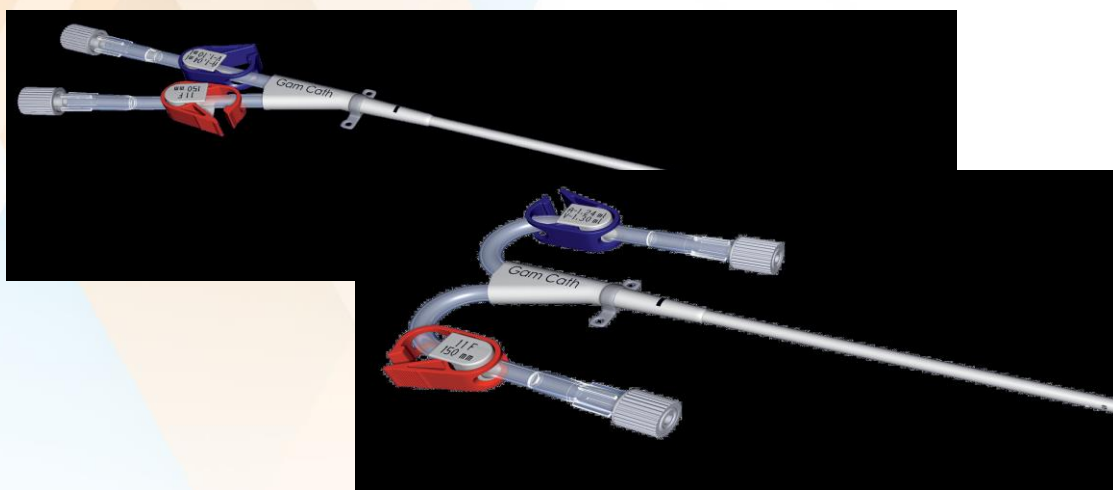

GAMCATH三腔留置导管

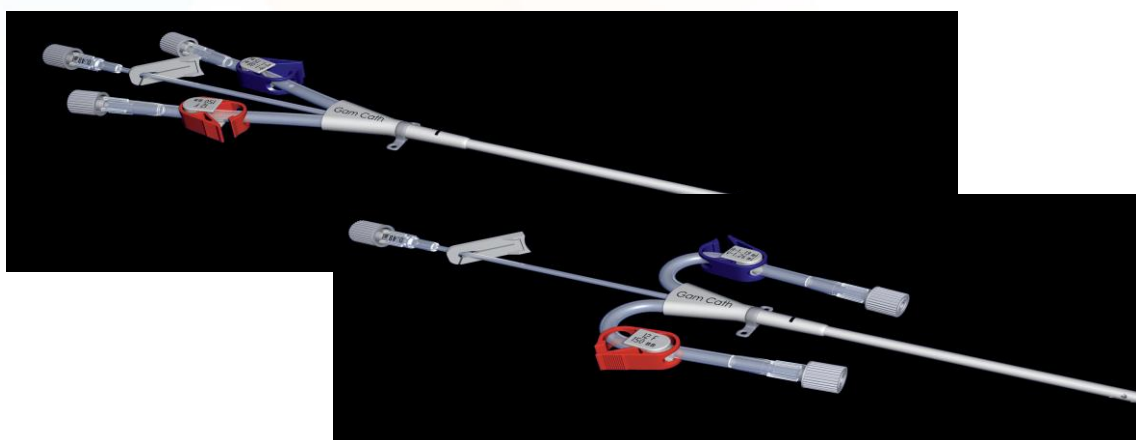


GAMCATH儿科双腔留置导管

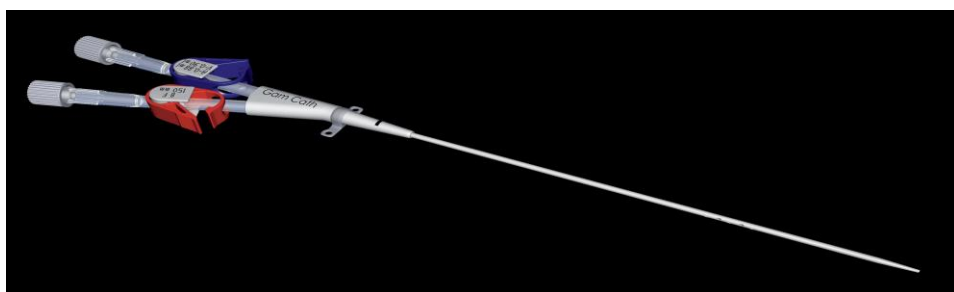


GAMCATH高流量留置导管

独特管腔设计：流量更高，优化血管通路质量

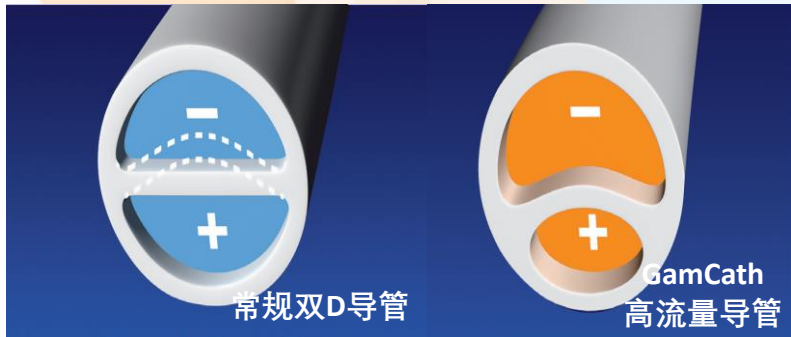

肾形管腔设计，流量更高


GamCath高流量导管管腔截面肾形设计，动脉腔比常规双D导管加大18%，避免导管变形，流量更高¹

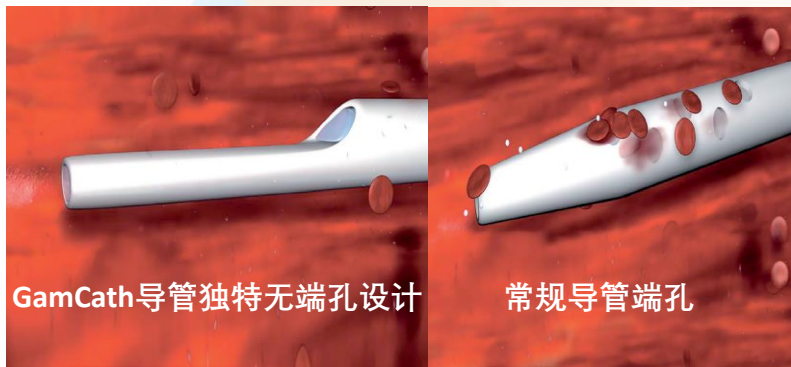

无侧孔设计，减少凝血

导管尖端双腔端孔错位结构，无侧孔设计，降低凝血风险^{2,3}

GAMCATH高流量双腔导管

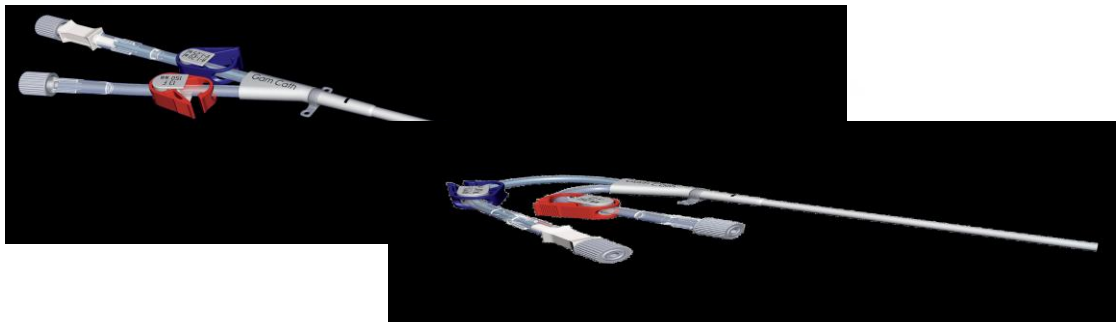

GAMCATH高流量三腔导管




GAMCATH海豚涂层高流量留置导管


先进的涂层技术，延长导管留置时间

- 百特专利海豚共聚物涂层，相比无涂层导管，表面更光滑⁴
- 体外研究显示，海豚涂层能够减少血栓相关的导管并发症，并减少蛋白吸附和细胞黏着⁵
- 共聚物涂层固定导管表面硫酸钡颗粒不脱落^{4,6}
- 临床研究显示，具有海豚涂层的透析导管留置时间更长^{6,7}
- 体外研究显示，具有海豚涂层的透析导管细菌增殖速度显著减缓⁶

GAMCATH海豚涂层高流量双腔导管

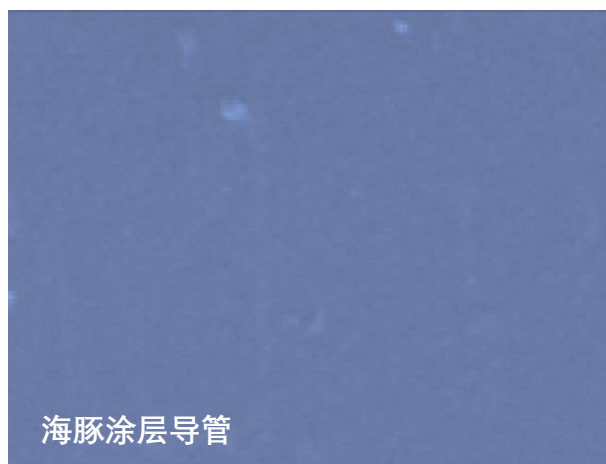

海豚涂层导管体内使用后，导管表面未见孔洞⁶

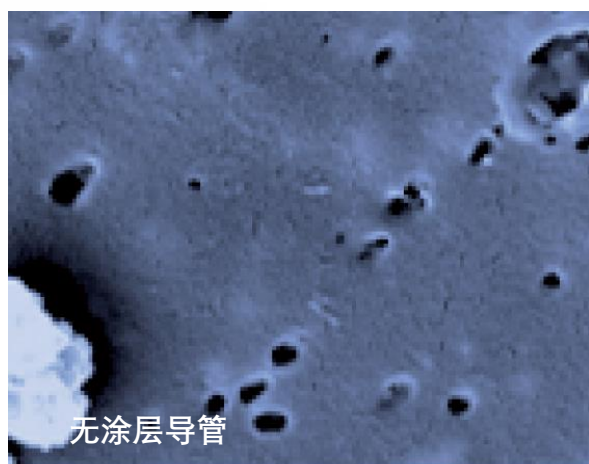

普通无涂层导管体内使用后，导管表面观测到大小不一的孔洞⁶

GAMCATH常规留置导管 订购信息

GAMCATH常规双腔导管

产品名称	订购号	外径(Fr)	长度(cm)	材质	其他信息	套/盒
GDC-1115	101797	11	15	热敏聚氨酯	-	5
GDC-1117.5	101242	11	17.5	热敏聚氨酯	-	5
GDC-1120	101799	11	20	热敏聚氨酯	-	5
GDC-1125	101800	11	25	热敏聚氨酯	-	5
GDC-1112.5J	101028	11	12.5	热敏聚氨酯	弯头	5
GDC-1115J	101798	11	15	热敏聚氨酯	弯头	5
GDC-1120J	101295	11	20	热敏聚氨酯	弯头	5

GAMCATH常规双腔导管套装

产品名称	订购号	外径(Fr)	长度(cm)	材质	其他信息	套/盒
GDK-1115	955055	11	15	热敏聚氨酯	-	5
GDK-1117.5	103241	11	17.5	热敏聚氨酯	-	5
GDK-1120	955056	11	20	热敏聚氨酯	-	5
GDK-1125	101511	11	25	热敏聚氨酯	-	5
GDK-1112.5J	955053	11	12.5	热敏聚氨酯	弯头	5
GDK-1115J	955054	11	15	热敏聚氨酯	弯头	5
GDK-1117.5J	101379	11	17.5	热敏聚氨酯	弯头	5
GDK-1120J	955057	11	20	热敏聚氨酯	弯头	5
GDK-1215	100842	12	15	热敏聚氨酯	-	5
GDK-1220	101803	12	20	热敏聚氨酯	-	5

GAMCATH儿科常规双腔导管套装

产品名称	订购号	外径(Fr)	长度(cm)	材质	其他信息	套/盒
GDK-610P	100943	6	10	热敏聚氨酯	-	5
GDK-612.5P	955059	6	12.5	热敏聚氨酯	-	5
GDK-810P	101512	8	10	热敏聚氨酯	-	5
GDK-812.5P	955058	8	12.5	热敏聚氨酯	-	5

GAMCATH常规留置导管 订购信息

GAMCATH常规三腔导管套装

产品名称	订购号	外径(Fr)	长度(cm)	材质	其他信息	套/盒
GTK-1215	101808	12	15	热敏聚氨酯	-	5
GTK-1217.5	103482	12	17.5	热敏聚氨酯	-	5
GTK-1220	101809	12	20	热敏聚氨酯	-	5
GTK-1215J	101384	12	15	热敏聚氨酯	弯头	5
GTK-1220J	101385	12	20	热敏聚氨酯	弯头	5

GAMCATH高流量留置导管、海豚涂层高流量留置导管 订购信息

GAMCATH高流量留置导管套装

产品名称	订购号	外径(Fr)	长度(cm)	材质	其他信息	套/盒
GDHK-1115	955424	11	15	热敏聚氨酯	-	5
GDHK-1120	955425	11	20	热敏聚氨酯	-	5
GDHK-1125	106661	11	25	热敏聚氨酯	-	5
GDHK-1315	955060	13	15	热敏聚氨酯	-	5
GDHK-1317.5	103357	13	17.5	热敏聚氨酯	-	5
GDHK-1320	955061	13	20	热敏聚氨酯	-	5
GDHK-1325	955062	13	25	热敏聚氨酯	-	5
GDHK-1115J	112572	11	15	热敏聚氨酯	弯头	5
GDHK-1120J	112573	11	20	热敏聚氨酯	弯头	5
GDHK-1315J	109535	13	15	热敏聚氨酯	弯头	5
GDHK-1320J	109511	13	20	热敏聚氨酯	弯头	5

GAMCATH海豚涂层高流量留置导管套装

产品名称	订购号	外径(Fr)	长度(cm)	材质	其他信息	套/盒
MS-GDHK-1315	955063	13	15	聚氨酯+海豚涂层*	-	5
MS-GDHK-1317.5	103521	13	17.5	聚氨酯+海豚涂层*	-	5
MS-GDHK-1320	955064	13	20	聚氨酯+海豚涂层*	-	5
MS-GDHK-1325	106662	13	25	聚氨酯+海豚涂层*	-	5

*聚氨酯-聚二甲基硅氧烷共聚物